

Guía de usuario de CardioChek Link[®]

Guía de usuario de CardioChek Link®

Este programa de software es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows® 7, Windows® 8.X, Vista

A. Uso previsto

CardioChek Link® es el software que se utiliza para recuperar los resultados de las pruebas de CardioChek® PA o CardioChek® Plus analizador, permitiendo imprimir y guardar los resultados en un ordenador. No debe utilizarse con ningún otro dispositivo. Un ordenador ejecutará una copia del CardioChek Link y se conectará a un CardioChek analizador. Si se abren varias ventanas de CardioChek Link, solo funcionará la primera. Si se conectan varios analizadores, solo se reconocerá uno de ellos.

B. Material Necesario


- CardioChek® PA o CardioChek® Plus analizador
- Cable USB de CardioChek Link

C. Antes de instalar el software de CardioChek Link


1. Cierre todos los programas.
2. Asegúrese de que el cable USB de CardioChek Link no esté conectado al ordenador.

D. Instalación del software de CardioChek Link


1. Haga doble clic en "CardioChek_Link.setup.exe".
2. Aparecerá una pantalla **Confirmar** que le preguntará si desea instalar el software. Haga clic en "Sí" o "No". Si nunca se ha instalado CardioChek Link en su ordenador, no verá este mensaje.

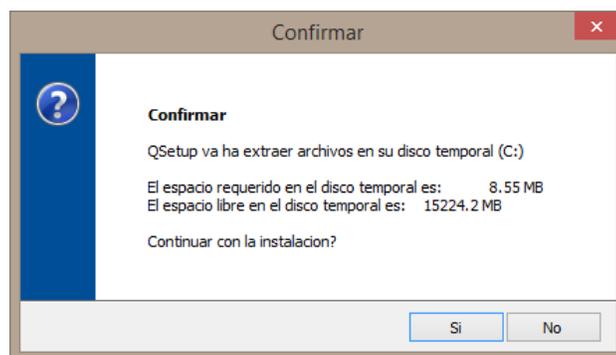


3. Se cargará el paquete de instalación QSetup.

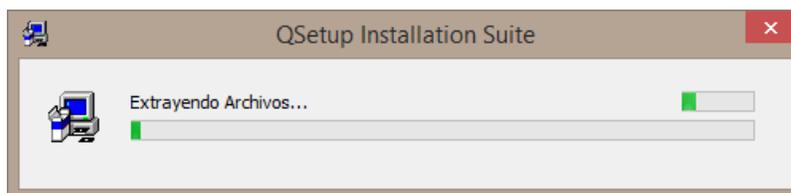

4. Aparecerá la ventana **Language Selection** (Selección de idioma). Seleccione el idioma y, a continuación, haga clic en "OK" ("Aceptar").

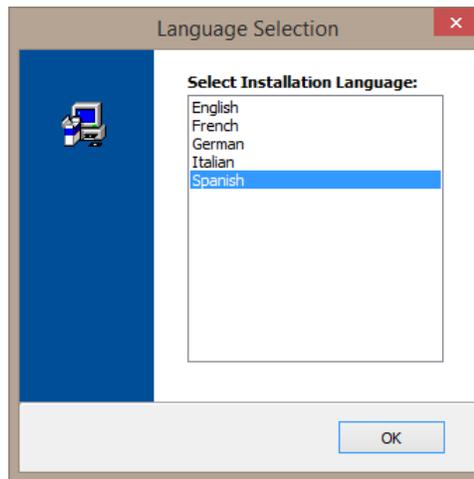

5. Aparecerá la ventana **Bienvenido**. Para continuar la instalación, haga clic en "Siguiente."

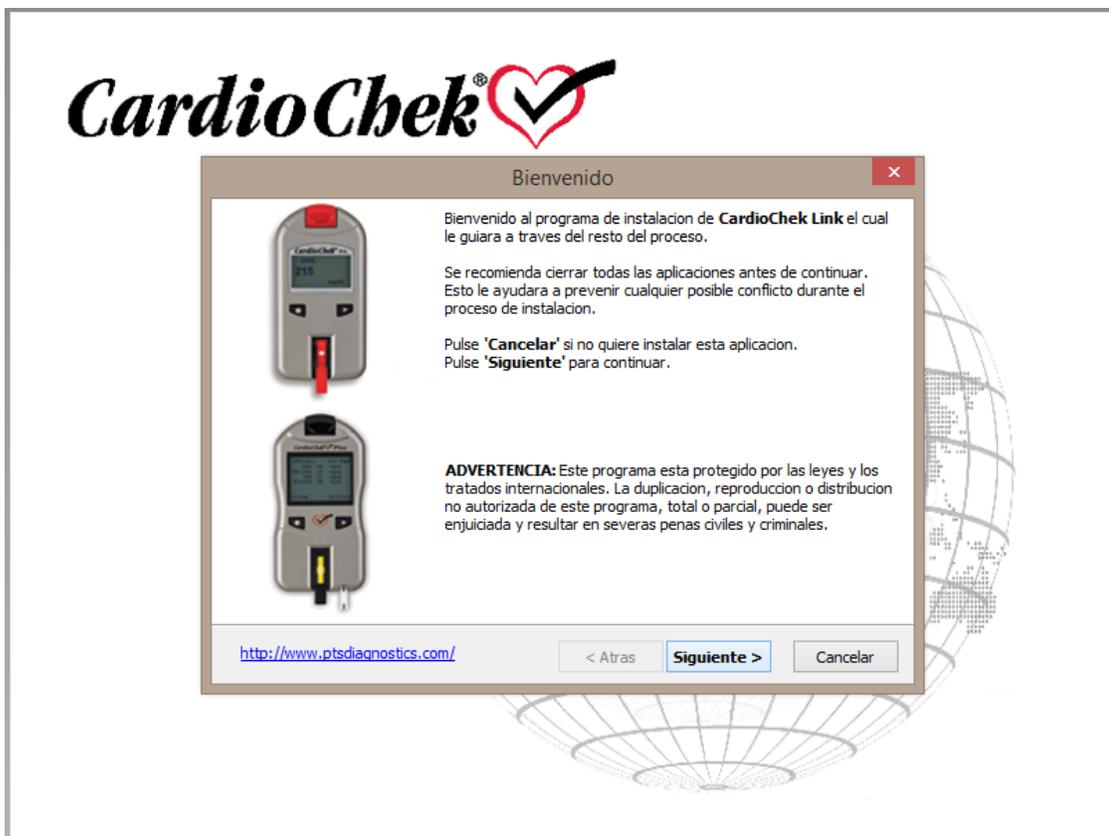


6. La siguiente pantalla es la de **Acuerdo de licencia de usuario final**. Si selecciona "Sí" y hace clic en "Siguiente" la instalación continuará. Si selecciona "No", no podrá instalar el software.




7. Aparecerá la pantalla **Léeme**. Lea los pasos y, a continuación, haga clic en "Siguiente."



8. Aparecerá la pantalla **Selección del Directorio Destino**. Puede utilizar la ubicación predeterminada que se muestra o hacer clic en el botón "Buscar" para instalar en otra ubicación. Después, haga clic en "Siguiente."

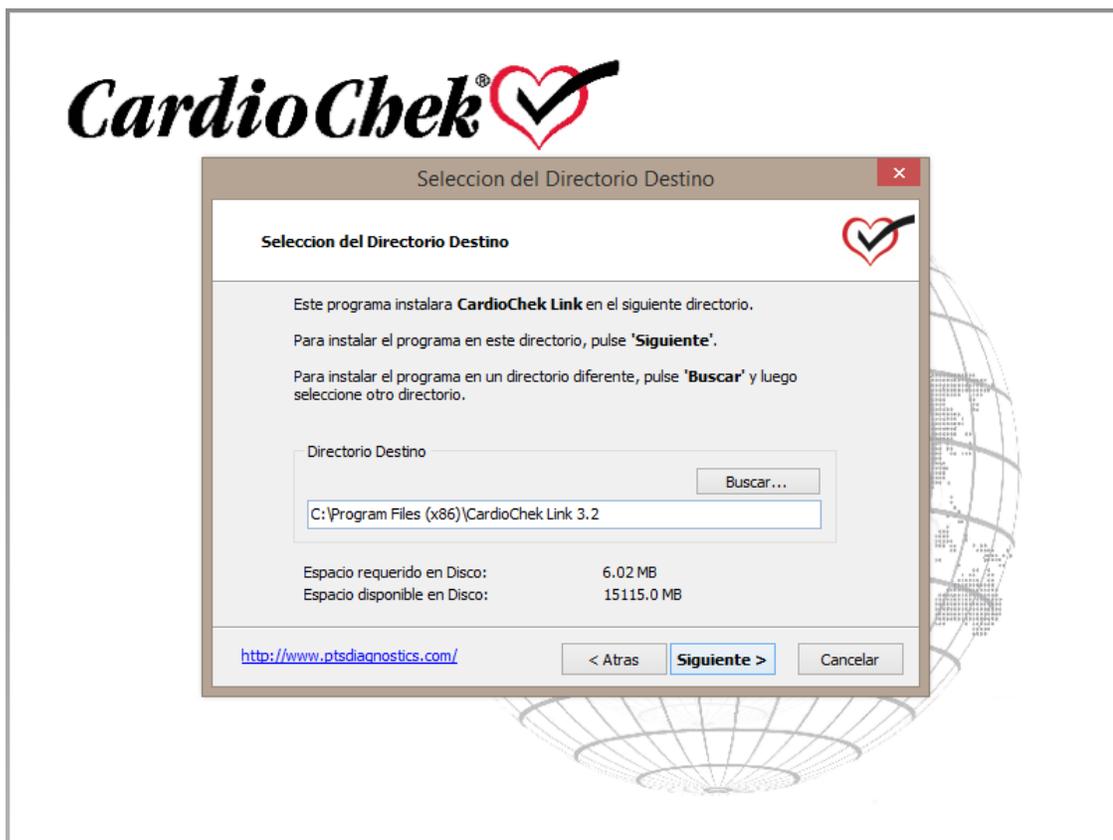


9. Aparecerá la pantalla **Accesos Directos** y podrá elegir si colocar el acceso directo de CardioChek Link en el escritorio o en la barra de inicio rápido. Marque las casillas que desee seleccionar, o déjelas sin marcar si no quiere crear ningún acceso directo. Haga clic en "Siguiente."

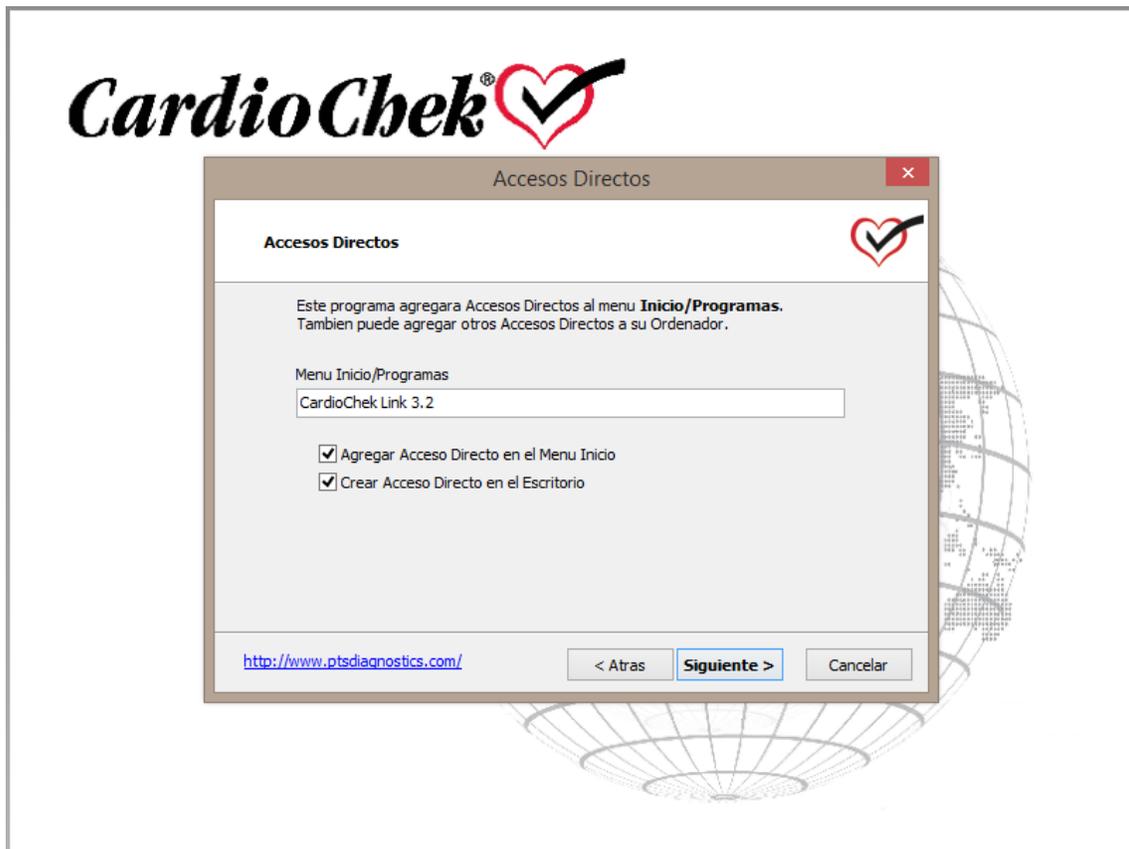

10. Aparecerá la pantalla **Confirmacion de las Opciones de Instalacion**. Para continuar la instalación, haga clic en "Siguiente." Para cambiar cualquier ajuste, haga clic en "Atrás."



11. Una vez haya hecho clic en "Siguiente," el sistema comenzará a **copiar archivos** y, a continuación, aparecerá la pantalla **Configuración completada**. Al hacer clic en el botón "Finalizar" se ejecutará el software.

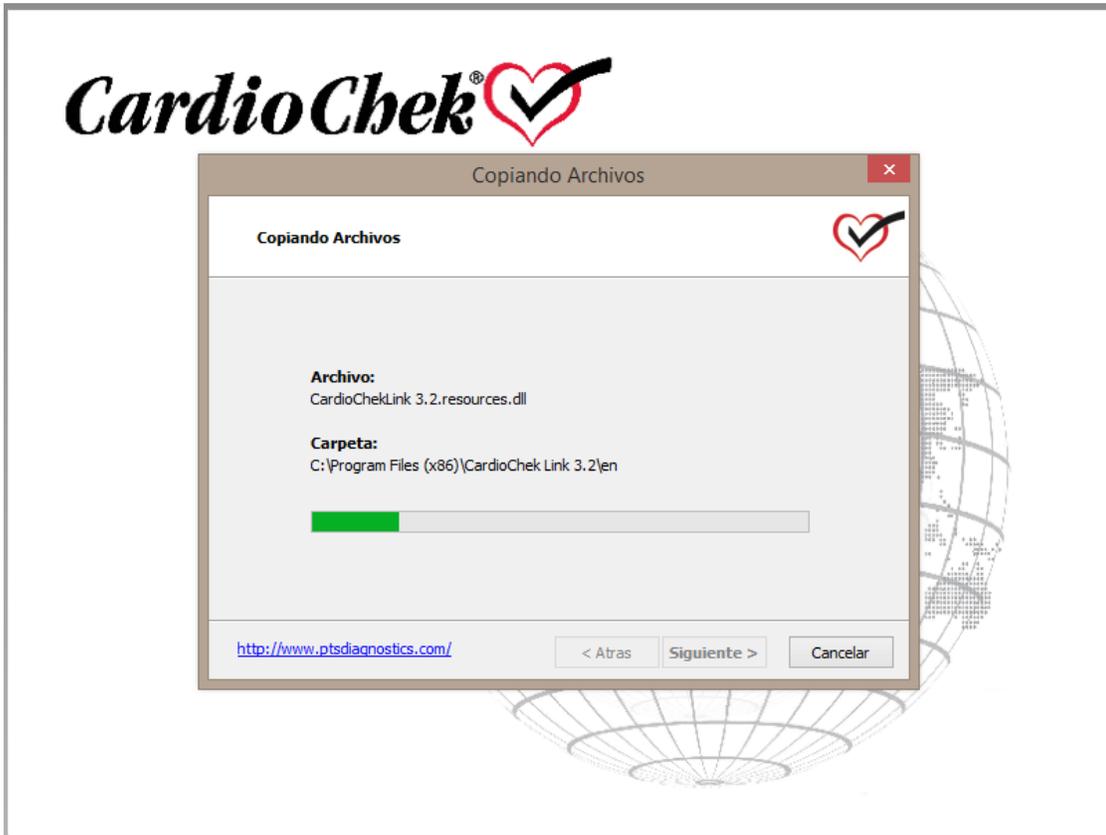

12. Aparecerá una pantalla de **aviso** una vez actualizado el software, con el mensaje, **"CardioChek Link se ha actualizado correctamente."** Haga clic en "Aceptar."


13. Después de instalar el software y los controladores de CardioChek Link[®], inserte el cable USB de CardioChek Link en el puerto del MEMo Chip[®] (ver imagen). A continuación, conecte un extremo del cable USB al ordenador.



14. Si aparece la ventana "Instalación de Hardware," haga clic en "Continuar de todos modos" para continuar con la instalación.
15. Espere a que Windows encuentre el nuevo hardware y complete la instalación.
16. Después de que en el ORDENADOR aparezca el mensaje "Nuevo hardware encontrado," CardioChek Link estará listo para utilizarse.

E. Uso de CardioChek Link®

1. Una vez conectado el CardioChek Link al ordenador, pulse uno de los botones del dispositivo CardioChek analizador para encenderlo.
2. Inicie el programa CardioChek Link desde el ordenador haciendo doble clic en el icono de CardioChek Link o siguiendo los menús: Inicio > Programa (Todos los programas) > CardioChek Link, y haciendo clic en el icono de CardioChek Link. También puede acceder directamente al directorio Archivos de programas\CardioChek Link (o a aquel en el que instaló el software) para iniciar el programa CardioChek Link. La primera vez que se abre CardioChek Link se mostrará el mensaje "Nuevo hardware encontrado."
3. Escriba los nombres de proveedor y paciente así como los números de ambos en orden a una correcta identificación. Esos nombres y números tienen sus campos de escritura obligados y deberán ser rellenados antes de realizar las pruebas. Cada nuevo paciente exigirá rellenar nuevos campos.
4. Seleccione el botón **Recibir datos de la prueba** para preparar el programa CardioChek Link para que acepte los datos del dispositivo CardioChek Connect analizador.
5. Utilice el dispositivo CardioChek Connect PA para llevar a cabo la prueba. Mientras el programa CardioChek Link espera la recepción de los datos del dispositivo CardioChek analizador, aparece la pantalla **Esperando los datos de CardioChek Analizador** con un símbolo de CardioChek con la forma de un corazón latiendo.

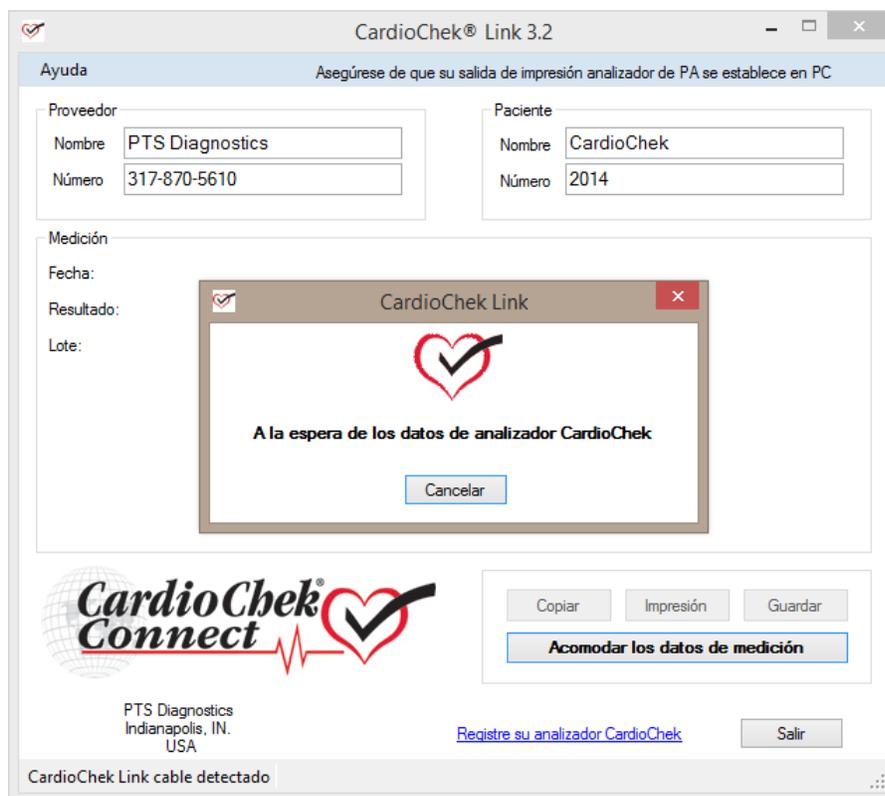

- Una vez completada una prueba, se mostrarán los resultados automáticamente en la pantalla del ordenador.

The screenshot shows the CardioChek Link 3.2 software window. At the top, it says 'Ayuda' and 'Asegúrese de que su salida de impresión analizador de PA se establece en PC'. Below this, there are two sections: 'Proveedor' (Provider) and 'Paciente' (Patient). The provider information includes 'Nombre: PTS Diagnostics' and 'Número: 317-870-5610'. The patient information includes 'Nombre: CardioChek' and 'Número: 2014'. Under 'Medición' (Measurement), it shows 'Fecha: 13 OCT 2014, 10:05 AM', 'Resultado: CHEM', and 'Lote: CODE Q303 (Lipid+eGLU)'. A table of results is displayed below:


CHOL	133 mg/dL	CALC LDL	45 mg/dL
HDL CHOL	43 mg/dL	TC/HDL	3.1
TRIG	224 mg/dL	LDL/HDL	1.1
eGLU	141 mg/dL	NON-HDL	90 mg/dL

At the bottom, there is the CardioChek Connect logo, the address 'PTS Diagnostics, Indianapolis, IN, USA', and a status bar that says 'CardioChek Link cable detectado'. There are also buttons for 'Copiar', 'Impresión', 'Guardar', and 'Salir', along with a link to 'Registre su analizador CardioChek'.

- Ahora puede utilizar las funciones **Copiar**, **Imprimir** o **Guardar** del programa para almacenar y grabar los resultados de la prueba.
- Seleccione **Copiar** para pegar los resultados de la prueba en otro programa como Bloc de notas de Microsoft o Microsoft Excel.
- Para imprimir los resultados, seleccione el botón **Imprimir** y siga las indicaciones del ordenador.
- Para guardar una copia de los resultados en una hoja de Excel, seleccione **Guardar** y crear un nombre de archivo. Al guardar archivo se crea un valor separado por comas (.csv). Para guardar los resultados de prueba adicionales para la misma hoja de cálculo, seleccione **Guardar** y seleccione el mismo nombre de archivo creado anteriormente para agregar el nuevo paciente y resultados de la prueba. Para guardar una copia en una nueva hoja de cálculo Excel, seleccione **Guardar** y crear un nuevo nombre de archivo.
- Para abrir un archivo guardado, vaya al directorio en el que se guardó y haga doble clic en el archivo. El archivo se abrirá automáticamente en Excel.
- Si se ha iniciado una prueba antes de seleccionar el botón **Recibir datos de la prueba**, los resultados no se mostrarán en la pantalla de CardioChek Link y aparecerá el mensaje **ERROR DE IMPRESIÓN** en CardioChek analizador. **NO** se perderán los resultados. Haga clic en el botón **Recibir datos de la prueba** y, a continuación, seleccione el resultado que desea imprimir o guardar desde el menú memoria de CardioChek

analizador. Si desea obtener más instrucciones sobre cómo acceder a la memoria, consulte la Guía de Usuario de CardioChek analizador.

13. Puede encontrar instrucciones y ayuda adicional si selecciona el menú desplegable **Ayuda** situado en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas de CardioChek Link.

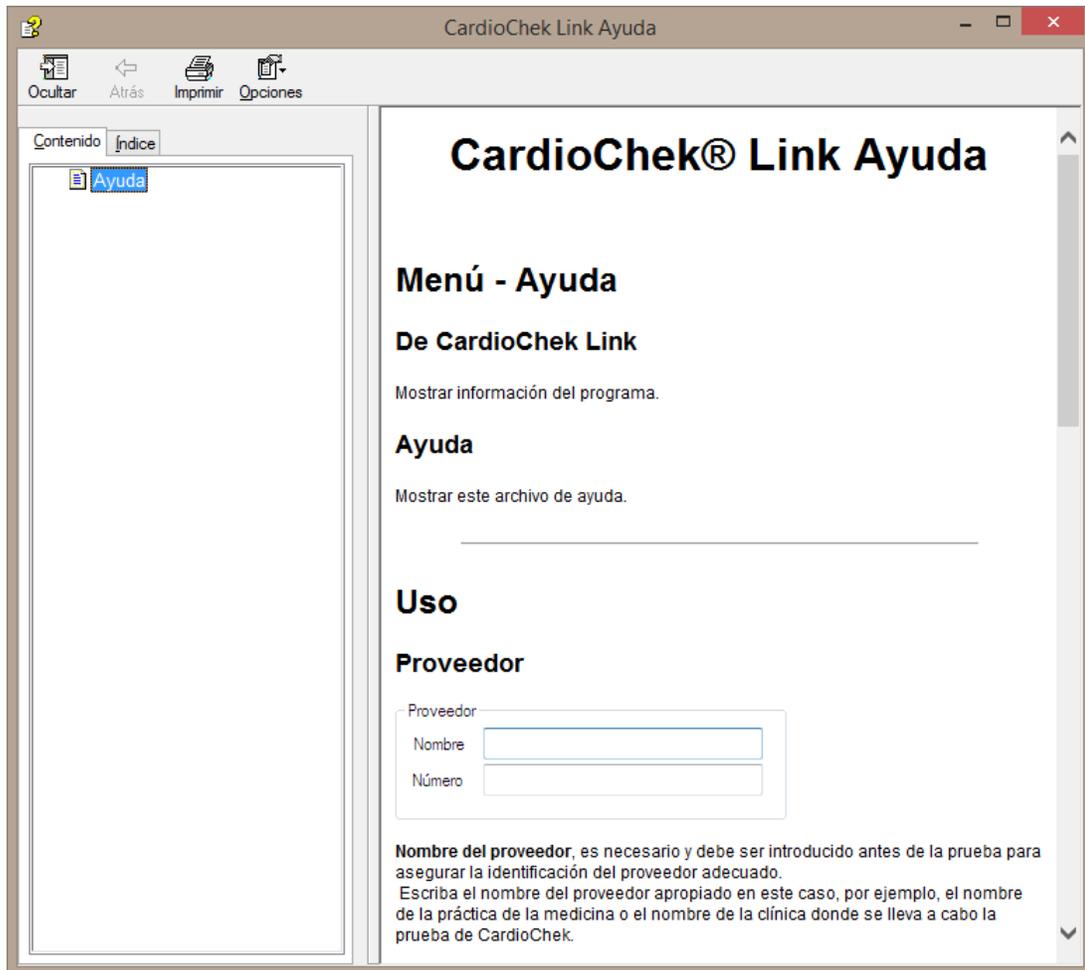

CardioChek Link® está fabricado en EE. UU. por la empresa
PTS Diagnostics, Indianapolis, IN 46268
Para cualquier pregunta sobre CardioChek Link®
puede dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de PTS Diagnostics:
+1-877-870-5610 (llamada gratuita en EE. UU.)
+1-317-870-5610 (Directo) +1-317-870-5608 (Fax)
Correo electrónico: inforequest@ptsdiagnostics.com
Sitio web: www.ptsdiagnostics.com
PS-002977 ES Rev. 0

