

Pour usage professionnel avec les analyseurs  
CardioChek® PA et CardioChek® Plus



**pts connect**  
**Blu-Adapter™**

## Consignes de sécurité importantes

1. Les utilisateurs doivent respecter le guide de l'utilisateur lorsqu'ils utilisent l'appareil PTS Connect Blu-Adapter™. Utiliser l'appareil d'une manière non conforme au guide de l'utilisateur peut altérer la protection assurée par l'équipement.
2. L'utilisateur doit inspecter visuellement l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Cette omission peut entraîner des résultats non fiables ou peut potentiellement mettre l'utilisateur en danger.

## Matériel requis

### Matériel fourni

REF 4718 Appareil PTS Connect Blu-Adapter (1)  
*Inclut deux (2) supports (uniquement pour l'analyseur CardioChek® PA)*

### Matériel requis mais non fourni pour le transfert des données

Ordinateur, tablette ou smartphone

*Pouvant se connecter à un appareil BLE Bluetooth®*

Application


*Pouvant accepter des données de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter*

## Instructions relatives aux supports pour appareil PTS Connect Blu-Adapter (Analyseurs CardioChek PA uniquement)

*Si vous utilisez l'analyseur CardioChek PA, vous devez fixer les deux (2) supports fournis avant d'utiliser l'appareil PTS Connect Blu-Adapter.*

Procédez comme suit pour fixer les supports à l'appareil PTS Connect Blu-Adapter.

1. Appuyez délicatement sur les onglets du support et insérez-les dans les deux orifices situés près de la partie supérieure de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter.
2. Relâchez le support pour le verrouiller en place.
3. Pour ôter les supports, appuyez délicatement de chaque côté du support et faites-le sortir directement des orifices de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter.

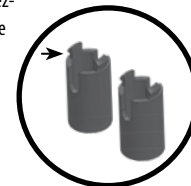

Pour obtenir des informations sur le produit et des instructions supplémentaires, consulter le site du fabricant : [www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter](http://www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter).

# Guide de l'utilisateur PTS Connect Blu-Adapter

## Usage prévu de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter

L'appareil PTS Connect Blu-Adapter est conçu pour transférer les résultats des tests des analyseurs CardioChek PA et CardioChek Plus à un appareil compatible avec la technologie Bluetooth à l'aide du port MEMO Chip® situé sur l'analyseur.

## Pairage

Consultez le guide de l'utilisateur de la tablette, de l'ordinateur ou du smartphone pour obtenir des instructions sur le pairage de cet appareil à l'appareil PTS Connect Blu-Adapter.

1. Assurez-vous que l'appareil PTS Connect Blu-Adapter est branché sur le port MEMO Chip de l'analyseur CardioChek PA ou CardioChek Plus et que l'analyseur est allumé. L'appareil devrait alors apparaître. Dans le menu des appareils compatibles avec la technologie Bluetooth disponibles, recherchez le nom « PTS- {Bluetooth ID} ». Vérifiez que les chiffres dans l'identifiant imprimé sur l'étiquette inférieure de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter correspondent aux chiffres figurant dans le « PTS- » détecté par l'appareil.
2. Exécutez le pairage d'un appareil à la fois à l'appareil PTS Connect Blu-Adapter. Le pairage de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter à plusieurs appareils augmente le risque d'envoyer par erreur les résultats des tests au mauvais appareil.
3. Lorsque le système vous demande de saisir un code PIN, saisissez le numéro imprimé sous l'appareil PTS Connect Blu-Adapter.
4. Si le code PIN est saisi correctement, le pairage de l'appareil avec l'appareil PTS Connect Blu-Adapter sera réussi.
5. Le pairage réussi de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter sera indiqué par un message émis par la tablette, l'ordinateur ou le smartphone.
6. Effectuez un test d'échantillon ou envoyez un résultat depuis la mémoire de l'analyseur vers l'application de collecte des données. (Consultez le guide de l'utilisateur de l'analyseur CardioChek PA ou CardioChek Plus pour obtenir des instructions sur le mode d'exécution d'un test.)

7. **Important** : Vérifiez que les résultats affichés sur l'analyseur correspondent à ceux de l'application de collecte des données. Cette étape consiste à s'assurer que l'appareil PTS Connect Blu-Adapter est correctement associé à la tablette, à l'ordinateur ou au smartphone concerné.

## Séparation

Consultez le guide de l'utilisateur de la tablette, de l'ordinateur ou du smartphone pour obtenir des instructions sur la séparation de l'appareil et de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter. Le non-respect de la séparation de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter et de l'appareil augmente le risque d'envoyer par erreur les résultats des tests au mauvais appareil au cours de l'événement suivant. **Important** : Cette étape consiste à s'assurer que l'appareil PTS Connect Blu-Adapter ne s'associe pas automatiquement au dispositif informatique pour les utilisations suivantes.

## Transfert des résultats à une application de collecte des données

Procédez aux étapes suivantes pour transmettre un résultat de test d'un analyseur CardioChek PA ou CardioChek Plus à un appareil PTS Connect Blu-Adapter avec une application de collecte des données.

1. Assurez-vous que le PTS Connect Blu-Adapter est branché sur le port MEMO Chip de l'analyseur CardioChek PA ou CardioChek Plus et que l'analyseur est allumé.
2. Exécutez l'application sur l'appareil qui collecte les résultats de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter.
3. Exécutez un test sur un analyseur CardioChek PA ou CardioChek Plus.
4. Une fois le test réalisé et le résultat affiché à l'écran, le résultat est transféré automatiquement à l'application réceptrice.

## Caractéristiques

### Appareil PTS Connect Blu-Adapter

**Caractéristiques électriques :** 5 Vcc et 200 mA

#### Données environnementales :

- Utilisation en intérieur
- Température : 5 à 50 °C (41 à 122 °F)
- Humidité : ≤ 80 %
- Degré de pollution : 2
- Altitude : jusqu'à 2 000 mètres

## Codes sonores de l'appareil PTS Connect Blu-Adapter

Phase de fonctionnement	Résultat
Erreur	Un son grave et prolongé.
Pairage/Configuration	Son court et unique émis uniquement toutes les 10 secondes lorsque le produit est prêt pour un pairage à un appareil Bluetooth.

## Symboles

 Consultez le mode d'emploi

 Limites de température


 Mise en garde

 Federal Communications Commission (FCC)


 Fabricant

 Numéro de catalogue


 Date de fabrication

 Conformément à la directive DEEE, ce produit doit être soumis à une collecte séparée en raison des équipements électriques et électroniques qu'il contient

 À conserver à l'abri du soleil

 À conserver au sec

 Numéro de lot

 Ce produit répond aux exigences de la European Directive 2014/53/EU relative aux équipements radio.



Polymer Technology Systems, Inc.  
4600 Anson Boulevard, Whitestown, IN 46075 – États-Unis  
Ligne directe : +1-317-870-5610 • Numéro gratuit à partir des États-Unis : 1-877-870-5610  
Fax : +1-317-870-5608  
E-mail : [customerservice@ptsdiagnostics.com](mailto:customerservice@ptsdiagnostics.com) • Site Internet : [ptsdiagnostics.com](http://ptsdiagnostics.com)



FCC-ID: A8TBM71S2

Pour obtenir des informations sur le produit et des instructions supplémentaires, consulter le site du fabricant : [www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter](http://www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter).

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par PTS Diagnostics est autorisée sous licence.

CardioChek, MEMo Chip et PTS Connect Blu-Adapter sont des marques commerciales de Polymer Technology Systems, Inc. Les autres marques commerciales et noms de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
© Copyright 2019 Polymer Technology Systems, Inc.  
PS-005524 FR Rev. 1 03/19