

Voor professioneel gebruik in combinatie met CardioChek® PA-  
en CardioChek® Plus-analyseapparaten



**pts connect**  
**Blu-Adapter™**

## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Gebruikers dienen zich te houden aan de gebruikershandleiding bij het gebruik van het PTS Connect Blu-Adapter™-apparaat. Als het apparaat wordt gebruikt op een manier die niet in de gebruikershandleiding wordt omschreven, biedt het apparaat mogelijk onvoldoende bescherming.
2. De gebruiker dient het apparaat visueel te controleren op fysieke schade alvorens het te gebruiken. Dit niet doen, kan leiden tot onbetrouwbare resultaten of mogelijk letsel bij de gebruiker.

## Hardwarevereisten

### Verstrekt materiaal

REF 4718    PTS Connect Blu-Adapter-apparaat (1)  
*Bevat twee (2) houders (uitsluitend voor gebruik met het CardioChek® PA-analyseapparaat)*

### Benodigd, maar niet-verstrekt materiaal voor gegevensoverdracht

Computer, tablet of smartphone

*Die verbinding kan maken met een Bluetooth® BLE-apparaat*

Toepassing


*Die gegevens van het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat kan accepteren*

## Instructies voor het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat (uitsluitend voor CardioChek PA-analyseapparaten)

*Bij gebruik van het CardioChek PA-analyseapparaat moeten de twee (2) bijgeleverde houders worden bevestigd alvorens het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat te gebruiken.*

Volg de onderstaande stappen om de houders te bevestigen aan het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat.

1. Druk voorzichtig op de lipjes van de houder en steek de lipjes in de twee sleuven bij de bovenkant van het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat.
2. Laat de houder los om hem te vergrendelen.
3. Om de houders te verwijderen, drukt u voorzichtig op de linker- en rechterkant van de houder en trekt u de houder recht uit de sleuven in het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat.

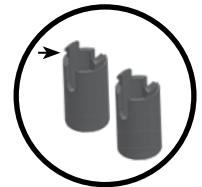

Voor productinformatie en bijkomende instructies kunt u terecht op de website van de fabrikant op [www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter](http://www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter).

# Gebruikershandleiding PTS Connect Blu-Adapter

## Beoogd gebruik PTS Connect Blu-Adapter-apparaat

Het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat is bedoeld om testresultaten van de CardioChek PA- en CardioChek Plus-analyseapparaten over te dragen naar een Bluetooth-compatibel apparaat door middel van de MEMO Chip®-poort op het analyseapparaat.

## Koppelen

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tablet, computer of smartphone voor instructies over het koppelen van het apparaat met het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat.

1. Controleer of het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat is aangesloten op de MEMO Chip-poort van het CardioChek PA- of CardioChek Plus-analyseapparaat en of het analyseapparaat is ingeschakeld. Het apparaat zou detecteerbaar moeten zijn. Zoek in het menu met beschikbare Bluetooth-ready apparaten naar de naam 'PTS- {Bluetooth ID}'. Controleer of de cijfers van de ID op het label onderaan het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat overeenstemmen met de cijfers in 'PTS-', gedetecteerd door het apparaat.
2. Koppel slechts één apparaat tegelijkertijd aan het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat. Als u het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat aan meerdere apparaten koppelt, bestaat er een groter risico dat de testresultaten naar het verkeerde apparaat worden verzonden.
3. Als u wordt verzocht een PIN-nummer in te voeren, voer dan het nummer in dat u op de onderkant van het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat vindt.
4. Als het PIN-nummer correct wordt ingevoerd, wordt het apparaat succesvol gekoppeld aan het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat.
5. Als het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat succesvol is gekoppeld, wordt dit aangegeven door een bericht van de tablet, computer of smartphone.
6. Voer een test uit of stuur een resultaat van het analyseapparaatgeheugen naar de gegevensregistratietoepassing. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van het CardioChek PA- of CardioChek Plus-analyseapparaat voor instructies omtrent het uitvoeren van een test.)

7. **Belangrijk:** controleer of de resultaten op het analyseapparaat overeenkomen met die in de gegevensregistratietoepassing. Deze stap zorgt ervoor dat het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat correct gekoppeld is met de toegewezen tablet, computer of smartphone.

## Ontkoppelen

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tablet, computer of smartphone voor instructies over het ontkoppelen van een apparaat van het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat. Als het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat niet wordt losgekoppeld van het apparaat, bestaat er een groter risico dat de testresultaten de volgende keer naar het verkeerde apparaat zouden worden gestuurd. **Belangrijk:** deze stap zorgt ervoor dat het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat niet automatisch koppelt met het computerapparaat bij het volgende gebruik.

## Resultaten overdragen naar een gegevensregistratietoepassing

Voer de volgende stappen uit om een testresultaat over te dragen van een CardioChek PA- of CardioChek Plus-analyseapparaat naar een PTS Connect Blu Adapter-apparaat met een gegevensregistratietoepassing.

1. Controleer of de PTS Connect Blu-Adapter is aangesloten op de MEMO Chip-poort van het CardioChek PA- of CardioChek Plus-analyseapparaat en of het analyseapparaat is ingeschakeld.
2. Start de toepassing op het apparaat dat resultaten registreert van het PTS Connect Blu-Adapter-apparaat.
3. Voer een test uit op een CardioChek PA- of CardioChek Plus-analyseapparaat.
4. Zodra het testen is voltooid en het resultaat op het scherm wordt weergegeven, wordt het resultaat automatisch overgedragen naar de ontvangende toepassing.

## Specificaties

### PTS Connect Blu-Adapter-apparaat

**Elektrische specificaties:** 5 V gelijkstroom en 200 mA

### Omgevingspecificaties:

- Voor gebruik binnenshuis
- Temperatuur: 5-50 °C (41-122 °F)
- Vochtigheid: ≤ 80%
- Vervuilingsgraad: 2
- Hoogte: max. 2.000 meter


### Pieptoncodes PTS Connect Blu-Adapter

Werkingsfase	Wat te verwachten?
Fout	Een lange, lage toon.
Koppelen/configuratie	Een enkele korte toon om de 10 seconden wanneer het product klaar is om te worden gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat.

## Symbolen

 Raadpleeg voor gebruik de instructies

 Temperatuurbepering

 Opgelet

 Federal Communications Commission (FCC)

 Fabrikant

 Catalogusnummer

 Productiedatum

 Het product vereist aparte verzameling van elektrische en elektronische apparatuur volgens de AEEA-richtlijn

 Beschermen tegen zonlicht

 Droog houden

 Partijcode

 Dit product voldoet aan de vereisten van de European Directive 2014/53/EU voor radioapparatuur.



Polymer Technology Systems, Inc.  
4600 Anson Boulevard, Whitestown, IN 46075 USA  
Rechtstreeks: +1 317 870 5610 • Gratis binnen de VS: 1-877-870-5610 • Fax: +1-317-870-5608  
E-mail: [customerservice@ptsdiagnostics.com](mailto:customerservice@ptsdiagnostics.com) • Website: [ptsdiagnostics.com](http://ptsdiagnostics.com)



FCC-ID: A8TBM71S2

Voor productinformatie en bijkomende instructies kunt u terecht op de website van de fabrikant op [www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter](http://www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter).

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door PTS Diagnostics is onder licentie.

CardioChek, MEMo Chip en PTS Connect Blu-Adapter zijn handelsmerken van Polymer Technology Systems, Inc. Alle andere handelsmerken en productnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.  
© Copyright 2019 Polymer Technology Systems, Inc.  
PS-005524 NL Rev. 1 02/19